

mediven® thrombexin 18

Medisinsk antitrombosestrømpe med 18 mmHg ved ankelen.



Indikasjoner

- Pre-, intra- og postoperativ fysikalsk tromboseprofylakse for immobile pasienter
- Forebygging av ødem og hematom
- Barselkvinner
- Sengeliggende pasienter

Toveiselastisk teknologi


Toveiselastikken i mediven thrombexin 18 gir meget god brukerkomfort. Strømpene føles myke og behagelige å ha på. Pasienten opplever også økt komfort rundt kneet uten at det går på bekostning av kompresjonseffekten.

mediven thrombexin 18 er tilstrekkelig elastisk i begge retninger slik at det ikke er behov for mer enn en lengde.

Gradert trykkprofil

mediven thrombexin 18 garanterer optimale trykkegenskaper¹: kompresjonen på benet avtar kontinuerlig fra distalt til proksimalt. Dette er viktig for å oppnå økt venøs tilbakestrømning.

Produktegenskaper

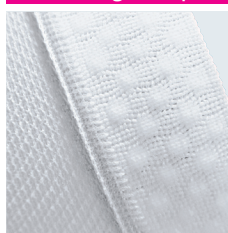

Spesialdesignet silikontoppbånd sørger for at strømpen holder seg oppe, og de små silikonnuppene sikrer god mikrosirkulasjon.




Fargekodet hæl som er foret med velur på innsiden, reduserer faren for trykksår, gjør sortering enklere og viser når hælen sitter korrekt.



Åpning under fotsålen gjør det mulig å sjekke sirkulasjonen, samtidig reduserer den risikoen for at pasienten kan falle.



Ekstra vidde øverst på låret for å hindre stase.

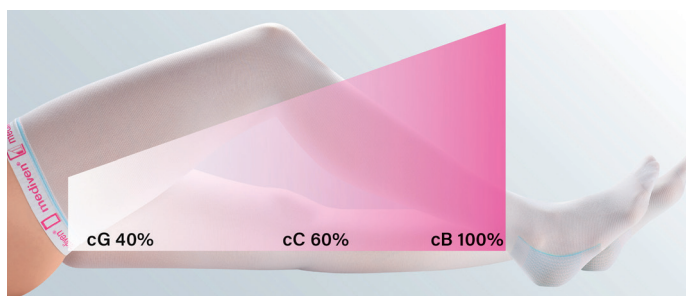

Inneholder ikke latex.



Lett kompresjon egnet for senge-liggende eller immobile pasienter.

Materialinnhold


Lateksfri	Elastane (EL)	Polyamide (PA)
	18 %	82 %

1) Thrombexin 18 oppfyller disse kravene jmf «Biomechanical characterisation of medical thrombosis prophylaxis stockings (MTPS)» Wegener, U, Kraft M, Kröger K, et.al. Gefäßchirurgie 2013; 18: 278-286

Korrekt tilpasning er viktig for effekt og pasientsikkerhet



Ankelomkrets avgjør strømpens størrelse.

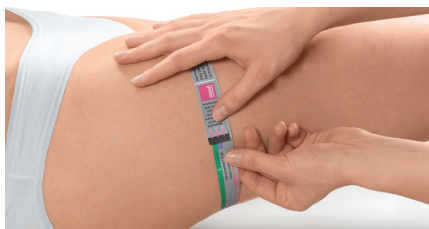

Låromkrets - bekrefter størrelser og viser evt. behov for ekstra vidde.




Indikator for korrekt tilpasning av størrelse.



Firkanten skal ikke strekkes mer enn til et kvadrat.



medi Hospitalbutler gjør det enkelt og greit for pasienter og ansatte å ta på medisinske antitrombosestrømper.

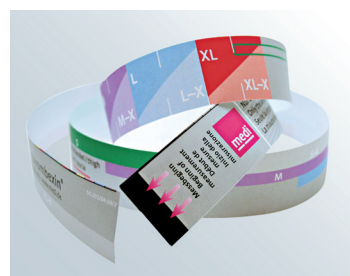

Målebånd til å måle omkrets rundt ankel og lår. Fargekodingen viser deg raskt og enkelt riktig strømpe.

Kne (AD)							
Størrelse	Benmål* (Omkrets i cm)					Fargekode	
	Ankel :B	Tykklegg :C	Under kne :D	Lår :G	Lengde AD	Hæl	Lår
XS	17 – 19	26 – 32	25 – 31	–	35 – 46	oransje	–
S	20 – 22	30 – 38	29 – 37	–	35 – 46	grønn	–
M	23 – 25	34 – 44	33 – 43	–	35 – 46	fiolett	–
L	26 – 28	38 – 48	37 – 47	–	35 – 46	blå	–
L-X	26 – 28	44 – 55	43 – 54	–	35 – 46	grå	–
XL	29 – 31	44 – 55	43 – 54	–	35 – 46	rød	–
XXL*	32 – 34	51 – 66	50 – 65	–	35 – 46	brun	–
Lår (AG)							
XS	17 – 19	26 – 36	25 – 35	40 – 50	60 – 84	oransje	oransje
S	20 – 22	30 – 42	29 – 41	48 – 60	65 – 89	grønn	grønn
S-X	20 – 22	30 – 42	29 – 41	56 – 70	65 – 89	grønn	grå
M	23 – 25	34 – 46	33 – 45	56 – 70	65 – 89	fiolett	fiolett
M-X	23 – 25	34 – 46	33 – 45	64 – 80	65 – 89	fiolett	grå
L	26 – 28	38 – 51	37 – 50	64 – 80	65 – 89	blå	blå
L-X	26 – 28	38 – 51	37 – 50	72 – 90	65 – 89	blå	grå
XL	29 – 31	42 – 55	41 – 54	72 – 90	65 – 89	rød	rød
XL-X	29 – 31	42 – 55	41 – 54	80 – 100	65 – 89	rød	grå

AD knestrømper:
7 størrelser

AG lårstrømper:
9 størrelser (4 med
ekstra vidde på lår)

